

# Erba®



## ErbaBLOT

ПРИБОР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  
ИММУНОБЛОТТИНГА



**ГИБКИЙ**

Возможность комбинации  
различных наборов и конъюгатов  
в одной постановке анализа



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ**


Позволяет одновременно обрабатывать  
до 48 стрипов



**«АНТИКАПЛЯ»**


Предотвращает образование  
капель на конце трубки в процессе  
дозирования

[www.erbarus.com](http://www.erbarus.com)  
[www.erba.com](http://www.erba.com)

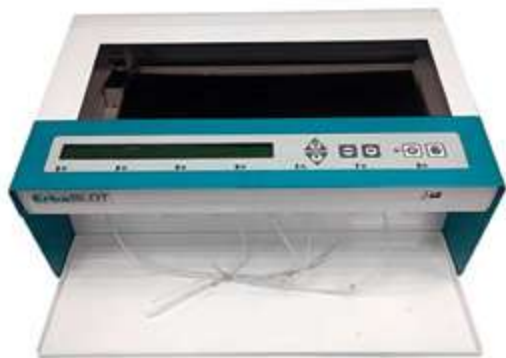

# ErbaBLOT

Открытая компактная система для автоматизации иммуноферментного анализа различными методами иммуноблота

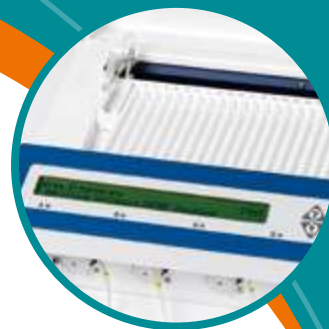

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Позволяет полностью автоматизировать различные варианты методов иммуноблота и вестерн-блота, а также определение avidности
- Позволяет одновременно обрабатывать до 48 стрипов
- Современное программное обеспечение позволяет быстро и легко настроить новые протоколы
- Память прибора рассчитана на сохранение до 20 различных методов, содержащих до 14 шагов каждый
- Мембранная 6-клавишная клавиатура
- Управление при помощи встроенного компьютера
- Жидкокристаллический дисплей, вмещающий 2 строки по 40 знаков
- 6/7 перистальтических насосов для реагентов
- Функция «антикапля» (предотвращает образование капель на конце трубки в процессе дозирования)
- Функция экономии реагентов (аспирация «мертвых» объемов реагентов назад во флаконы после дозирования)
- Три скорости вращения реакционного стола
- Возможность комбинации различных наборов и конъюгатов в одной постановке анализа
- Небольшие габариты и вес (52 x 31 x 25 см, 14 кг.)

Регистрационный номер медицинского изделия РЗН 2013/1177 от 11.09.2013

# Erba®

АО «Эрба Рус» - представительство Erba Group в РФ

📍 109316 г. Москва, Волгоградский пр., д. 43, к. 3, эт. 18  
☎ +7 (495) 755-55-80 ✉ [sale@erba.com](mailto:sale@erba.com) 🌐 [www.erbarus.com](http://www.erbarus.com)



CE 2797