




Гистопроецессор HP300



Гистологический процессор замкнутого типа DAKESHP HP 300, гарантирует качественную проводку и максимальную безопасность образцов.

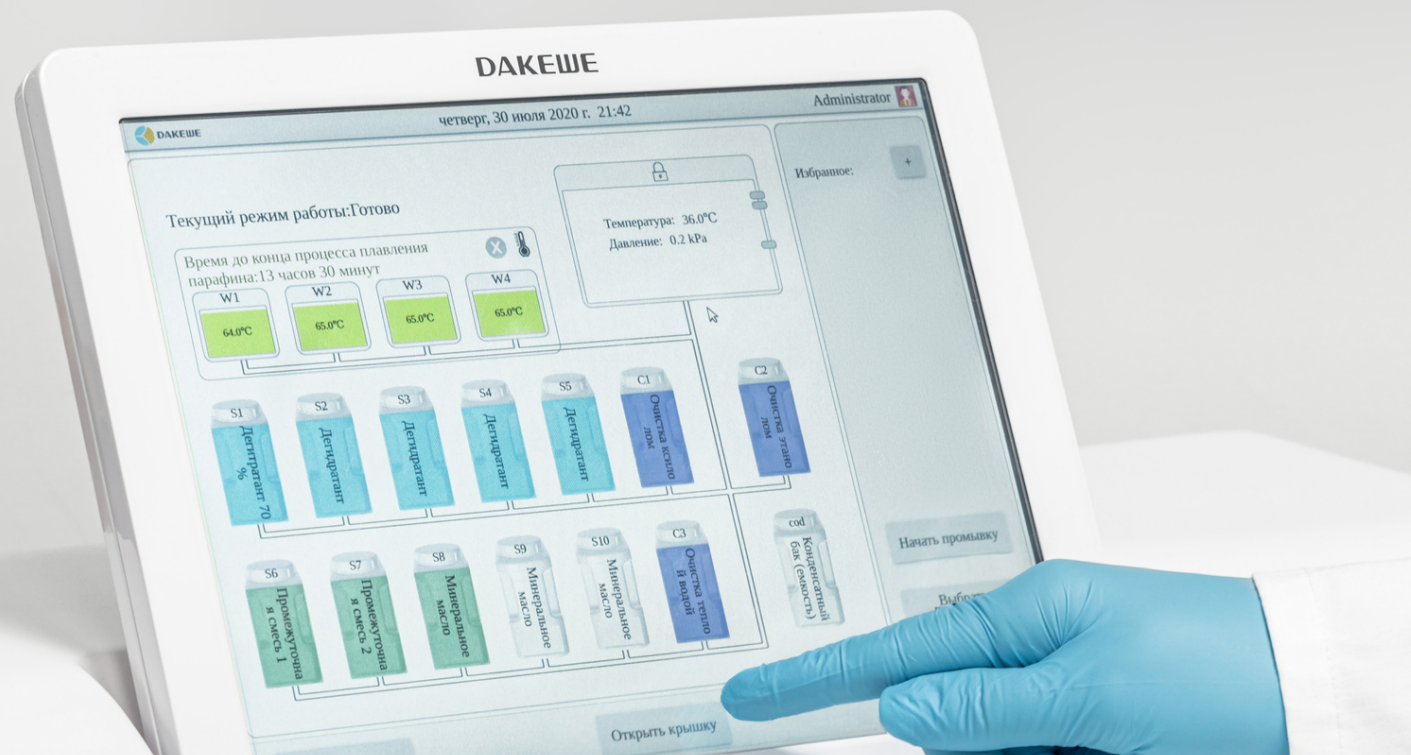



Русифицированный интерфейс обеспечивает легкость в настройке протоколов и быструю адаптацию сотрудников лаборатории к работе с прибором.



Управление через смартфон позволяет отслеживать статус прибора и управлять его работой с экрана смартфона в режиме реального времени.



Получение данных о техническом состоянии прибора и степени износа комплектующих одним нажатием кнопки, не прибегая к вызову сервисного инженера.

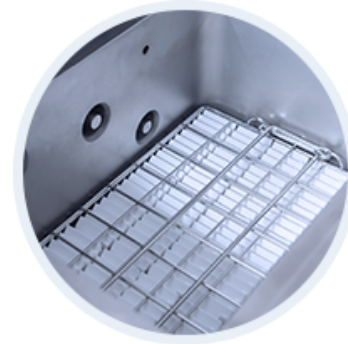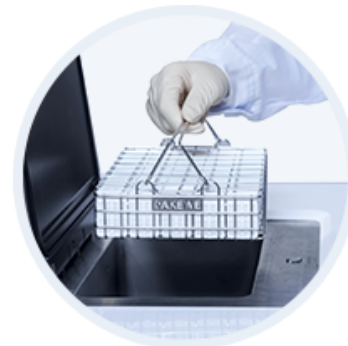

ЮНУСОВ ТЕЙМУР

Старший лаборант
Патологоанатомического отделения
ГБУЗ ГKB N 40 ДЗМ Коммунарка

Контакты официального представителя Dakewe в России
телефон для консультации: +7 (495) 796-59-28
e-mail: histo@erbamannheim.com



Уникальный дизайн и качественные комплектующие

Встроенный цветной монитор с сенсорным 12.1 дюймовым экраном, изменение угла наклона экрана. Устойчив к воздействию спиртов и ксилола.

Режим блокировки экрана для очистки предотвращает случайное воздействие в процессе обработки образцов.

Мраморная столешница легко моется и позволяет с высокой точностью поддерживать температуру до 65 °C в реторте.

Крышка реторты с функцией нагрева открывается одним прикосновением и автоматически блокируется после окончания работы. Выполнена из тефлона, легко моется.

Голубая LED-подсветка отделения с реагентами позволяет легко оценить уровень реагентов, не вынимая емкости из прибора.

Световой индикатор статуса прибора на передней панели:

- зеленый цвет - прибор в режиме работы;
- желтый - прибор в режиме тестирования;
- красный – прибору требуется обслуживание.

Комплексная система защиты образцов

Автоматический контроль качества реагентов и напоминание о замене.

Встроенный источник бесперебойного питания - в случае аварийного отключения электроэнергии система переключается на ИБП и восстанавливает протокол после подключения электроэнергии

Встроенные датчики температуры в реторте, интеллектуальный алгоритм поддержания температуры.

Резервная система пневмо насосов обеспечивает непрерывную стабильную работу.

Автоматическое пополнение реагентов и парафина в реторте в случае недостаточного количества.

Ультразвуковые датчики уровня жидкости в реторте, точное определение уровня и контроль заполнения реторты реагентами.



DAKEWE HP 300

отсканируйте QR-код и посмотрите видео



Встроенная интеллектуальная система управления

Автоматическая проверка состояния прибора перед стартом помогает лаборанту определить его готовность к работе. Программное обеспечение прибора само подскажет, какие шаги необходимо выполнить, чтобы цикл проводки прошел без ошибок.

Мониторинг параметров работы прибора в режиме реального времени. Хранение данных о работе гистопроцессора с возможностью записи на внешний USB-носитель.

Система ротации и мониторинга позволяет контролировать расход реагентов и уменьшает ручной труд. Система автоматически считает количество кассет/партий/дней использования реагентов и предупреждает лаборанта о необходимости замены того или иного реагента до начала проводки.

Легкость обучения и использования

Многопользовательский доступ с 3 уровнями доступа.

Полностью русифицированный интерфейс, легкий в обучении и использовании. Цветовая схема обозначения реагентов.

Интеллектуальное ПО помогает избежать ошибок, которые могли бы повлиять на качество образцов.

Функция удаленного управления гистопроцессором позволяет контролировать работу прибора в режиме реального времени с экрана смартфона или компьютера, отслеживать уведомления о неполадках.

Облачный сервер хранения данных состояния износа деталей прибора позволяет планировать замену деталей и контролировать общее состояние прибора.

Оптимизация работы и производительности

Интеллектуальный расход реагентов в зависимости от количества кассет, количества партий и дней использования реагентов

Встроенные циклы очистки прибора: быстрая промывка, стандартная промывка, интенсивная промывка.

Изменяемая ёмкость загрузки гистопроцессора: доступны на выбор корзины на 70 и 150 кассет. Максимальная вместимость прибора - 300 кассет.

4 парафиновые станции с удобной системой заполнения. Парафин можно заменить или пополнить в процессе работы прибора.