

Erba®



ErbaBLOT

ПРИБОР ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ИММУНОБЛОТТИНГА



ГИБКИЙ

Возможность комбинации
различных наборов и конъюгатов
в одной постановке анализа



48 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ


Позволяет одновременно обрабатывать
до 48 стрипов



«АНТИКАПЛЯ»


Предотвращает образование
капель на конце трубки в процессе
дозирования

www.erbarus.com
www.erba.com

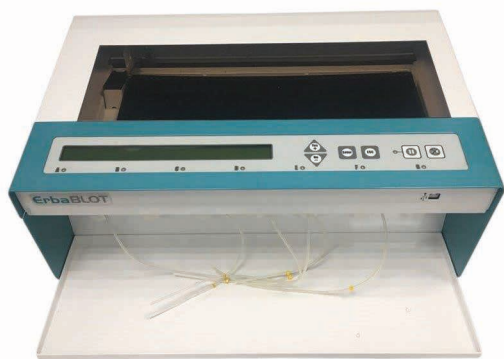

ErbaBLOT

Открытая компактная система для автоматизации иммуноферментного анализа различными методами иммуноблота

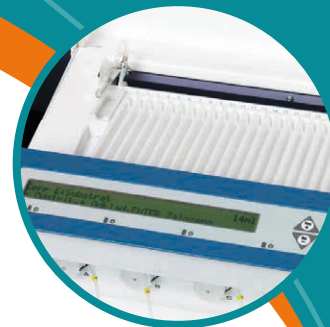

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Позволяет полностью автоматизировать различные варианты методов иммуноблота и вестерн-блота, а также определение avidности
- Позволяет одновременно обрабатывать до 48 стрипов
- Современное программное обеспечение позволяет быстро и легко настроить новые протоколы
- Память прибора рассчитана на сохранение до 20 различных методов, содержащих до 14 шагов каждый
- Мембранная 6-клавишная клавиатура
- Управление при помощи встроенного компьютера
- Жидкокристаллический дисплей, вмещающий 2 строки по 40 знаков
- 6/7 перистальтических насосов для реагентов
- Функция «антикапля» (предотвращает образование капель на конце трубки в процессе дозирования)
- Функция экономии реагентов (аспирация «мертвых» объемов реагентов назад во флаконы после дозирования)
- Три скорости вращения реакционного стола
- Возможность комбинации различных наборов и конъюгатов в одной постановке анализа
- Небольшие габариты и вес (52 x 31 x 25 см, 14 кг.)



АО «Эрба Рус» - представительство Erba Group в РФ

📍 109316 г. Москва, Волгоградский пр., д. 43, к. 3, эт. 18
☎ +7 (495) 755-78-81; +7 (495) 755-55-80
✉ sale@erba.com 🌐 www.erbarus.com

